



Medalkan
HYGIENE & DISINFECTION

The Next Generation of Medical Disinfectants



Catalogue produits pour les hôpitaux et cliniques

2024



Fabriqués dans
l'Union Européenne

www.medalkan.fr



Medalkan

HYGIENE & DISINFECTION

The Next generation of Medical Disinfectants





Sommaire

04 Notre société - Les Normes Européennes pour les dispositifs médicaux

05 Mycobactéries - Situation et propagation

06 Hygiène des mains

NOSODERM GEL 70
Gel hydroalcoolique pour les mains

NOSODERM GEL 80
Gel antiseptique hydroalcoolique pour les mains

08 Nettoyage et désinfection des surfaces

NOSOSEPT 100
Spray désinfectant rapide pour surfaces et équipements médicaux

NOSOFAST TB
Spray moussant désinfectant pour surfaces de l'équipement médical

NOSOFLOOR
Détergent désinfectant de surfaces ultra concentré pour surfaces de l'équipement médical

11 Traitement des endoscopes

NOSOZYM
EDétergent enzymatique pour endoscopes et instruments chirurgicaux

NOSOZYM 6 PLUS
Détergent pluri-enzymatique pour endoscopes et instruments chirurgicaux

NOSOCID PAA
Désinfectant de haut niveau à base d'acide peracétique

16 Désinfection des instruments

NOSOPROTECT
Désinfectant mycobactéricide ultra-concentré pour instruments chirurgicaux

NOSOPROTECT 100
Spray moussant détergent et désinfectant pour instruments chirurgicaux

19 Nettoyage des instruments -
Traitement manuel ou automatisé

NOSOCLEAN
Détergent alcalin pour le traitement des instruments chirurgicaux et de l'équipement

NEUTRALKAN
Agent neutralisant acide et rénovateur des instruments

CITRALKAN
Agent neutralisant acide pour le traitement des instruments chirurgicaux

NOSOCLEAR
Liquide de rinçage pour le traitement automatisé des instruments et équipements chirurgicaux

23 Traitement automatisé des bassins de lit

NOSOMATIC SK1
Détergent alcalin pour lave-bassins

NOSOMATIC SK2
Détartrant acide et liquide de rinçage pour lave-bassins

26 Tableau récapitulatif des produits

Notre Société



MEDALKAN est une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits d'hygiène et de désinfection. Créée en 2012, elle bénéficie d'une notoriété en matière d'innovation dans le secteur de la santé.

Les produits MEDALKAN ont été conçus et développés par une équipe composée d'experts français et grecs. Ils sont fabriqués en Grèce et formulés sur la base des dernières avancées technologiques.

Notre société bénéficie d'une situation géographique stratégique sur le bassin méditerranéen à Athènes en Grèce.

Le Port du Pirée, principal port maritime d'Athènes, est l'un des plus grands d'Europe. Il figure également dans le top 10 des ports de conteneurs européens. Il s'agit de la plateforme portuaire la plus fréquentée du bassin méditerranéen. Cela nous donne un accès rapide pour déployer d'importants approvisionnements en Europe et via le canal de Suez en Afrique, au Moyen-Orient et en Extrême-Orient.

MEDALKAN est certifiée ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016 pour le concept, la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux.

Les produits MEDALKAN portent le marquage CE conformément à la directive 93/42/CEE et au règlement MDR (Règlement du conseil 2017/745/UE) pour les dispositifs médicaux.

MEDALKAN applique les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) lesquelles garantissent la fabrication et le contrôle des produits et assurent ainsi la qualité.

MEDALKAN propose une gamme complète de produits nettoyants et désinfectants de haute qualité portant le marquage CE afin de répondre aux exigences les plus récentes en matière de contrôle du risque infectieux.

Celle-ci comprend des dispositifs médicaux spécialisés pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, des instruments, des endoscopes et autres applications spécifiques ainsi qu'une ligne de produits destinée à l'hygiène des mains.

Réservés à un usage professionnel, nos produits sont utilisés par le personnel de santé dans les hôpitaux, cliniques, cabinets dentaires et centres d'examen.

Une attention particulière a été portée à leurs propriétés microbiologiques, leur efficacité, leur compatibilité avec les matériaux sensibles et l'environnement.



Les Normes Européennes pour les dispositifs médicaux

SPECTRE D'ACTIVITE	PHASE ET ETAPE DE LA NORME	CONDITIONS DE TEST	SOUCHES MICROBIENNES	TEMPS DE CONTACT	LOG
BACTERICIDE*	EN 13727 Phase 2/ Etape 1	Conditions: propreté / saleté	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	60 Min.	5 Log
	EN 14561 Phase 2/ Etape 2 (Optional)	Conditions: propreté / saleté	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	60 Min.	5 Log
FONGICIDE	EN 13624 Phase 2/ Etape 1	Conditions: propreté / saleté	Candida albicans (levuricide) Aspergillus brasiliensis (fongicide)	60 Min.	4 Log
	EN 14562 Phase 2/ Etape 2 (Optionnel)	Conditions: propreté / saleté	Candida albicans (yeastocidal) Aspergillus brasiliensis (fongicide)	60 Min.	4 Log
TUBERCULOCIDE / MYCOBACTERICIDE	EN 14348 Phase 2/ Etape 1	Conditions: propreté / saleté	Mycobacterium terrae (Tuberculocide) M. terrae + M. avium (Mycobactericide)	60 Min.	4 Log
	EN 14563 Phase 2/ Etape 2 (Optional)	Conditions: propreté / saleté	Mycobacterium terrae (Tuberculocide) M. terrae + M. avium (Mycobactericide)	60 Min.	4 Log
VIRUCIDE** (CONTRE LES VIRUS ENVELOPPES)	DVV (1)/ RKI (2)(2014) Phase 2/ Etape 1 Partiellement virucide	Conditions: propreté / saleté	BVDV (virus de la diarrhée virale bovine) Vaccinia virus	60 Min.	4 Log
VIRUCIDE**	EN 14476 Phase 2/ Etape 1	Conditions: propreté / saleté	Poliovirus Adenovirus Norovirus	60 Min.	4 Log
SPORICIDE	EN 14347 Phase 1	Conditions de propreté	Bacillus subtilis Bacillus cereus (Optionnel) Clostridium difficile (Optionnel)	60 Min.	4 Log
	EN 17126 Phase 2/ Etape 1	Conditions de propreté	Bacillus subtilis Clostridioïdes difficile Bacillus cereus	60 Min.	4 Log

* Y compris toutes les souches résistantes aux antibiotiques tels que Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, streptococcus pneumoniae, etc.

** Virus inclus: HIV, BVDV, Vaccinia Virus, HBV (Hépatite B), HCV (Hépatite C), Influenza H1N1, H5N1, H1N8, Zika virus, Herpes simplex, Ebola, Coronavirus.

(1) DVV: Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten / Association allemande pour le contrôle des maladies virales

(2) RKI: Robert Koch Institute - Autorité fédérale allemande de la santé


Mycobactéries - Situation et propagation

Situation mondiale

Selon un rapport de l'organisation mondiale de la santé (OMS) de 2015, la tuberculose reste l'une des 10 principales causes de décès dans le monde.

Malgré les efforts considérables déployés par les Nations Unies pour éradiquer la maladie d'ici 2030, une épidémie mondiale de tuberculose persiste.

Un autre défi auquel nous devons faire face est l'effet de la mondialisation, c'est-à-dire l'augmentation spectaculaire des mouvements de population et des individus qui englobent les activités touristiques, les diasporas de réfugiés et, bientôt, les migrants climatiques.

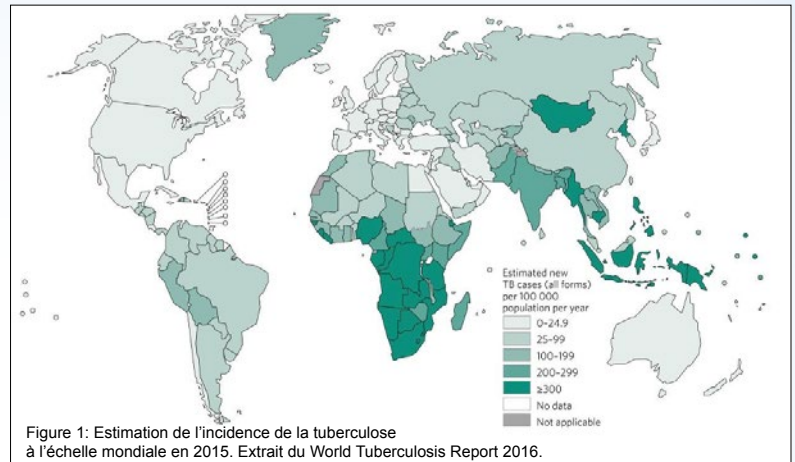

Ce maelström en cours a de multiples conséquences telles qu'un nombre croissant de patients infectés par des souches non endémiques, la propagation de souches multirésistantes (MDR) en provenance de pays déficients en soins de santé, et le spectre effrayant de l'expansion des souches totalement résistantes aux médicaments (TDR).

Mondialement la tuberculose toucherait entre 2 et 3 milliards de personnes de façon asymptomatique.

Parmi ceux-ci, seuls 5 à 15% développeront la maladie durant leur vie, avec une probabilité accrue chez les patients immuno-déficients, affaiblis par l'âge ou en état de malnutrition.

En 2015, d'après le World Tuberculosis Report 2016 (OMS), les principaux chiffres de la maladie sont les suivants :

- La tuberculose reste en 2015 une des dix premières causes de décès à l'échelle mondiale, devant le VIH, malgré un déclin du nombre de nouveaux cas de 1.5% par rapport à 2014.
- 10.4 millions de nouveaux cas en 2015 pour un total de 6.1 millions de cas notifiés et reportés à l'OMS (Figure 1).
- En 2020, au total, 1,5 million de personnes sont mortes de la tuberculose (dont 214 000 présentaient également une infection à VIH). À l'échelle mondiale, la tuberculose est la 13e cause de mortalité et la deuxième due à une maladie infectieuse, derrière la COVID-19 (et avant le sida).

Propagation des Mycobactéries

Contrairement à la tuberculose qui se propage principalement dans l'air, les mycobactéries atypiques sont des pathogènes opportunistes classiques avec une très large présence dans les biofilms et dans les environnements naturels et artificiels. Elles sont intrinsèquement plus résistantes aux microbicides mais également à de nombreux agents chimiothérapeutiques.

Les mycobactéries peuvent survivre sur les surfaces pendant des jours ou des mois. L'eau et le sol sont les principaux réservoirs des mycobactéries environnementales, le nez et la bouche ainsi que les tissus mous et la peau endommagés étant les principales portes d'entrée.

Les mycobactéries environnementales présentes dans les biofilms, dans l'eau de rinçage ou à l'intérieur des laveurs d'endoscopes eux-mêmes, peuvent contaminer les dispositifs médicaux semi-critiques, entraînant des infections iatrogènes, des pseudo-épidémies ou des diagnostics erronés.

Les dispositifs semi-critiques mal traités tels que les gastroscopes et les bronchoscopes peuvent être des vecteurs de propagation iatrogène.



Les tests microbiologiques réalisés (testés EN 14348 sur Mycobacterium Terrae et Mycobacterium Avium), garantissent que **NOSOSEPT 100**, **NOSOFAST TB**, **NOSOFLOOR**, **NOSOPROTECT 100**, **NOSOPROTECT** et **NOSOCID PAA** offrent la meilleure sécurité possible contre Mycobacterium tuberculosis et les mycobactéries atypiques.

Hygiène des mains

Les mains sont un vecteur très important de transmission microbienne. L'hygiène des mains peut réduire considérablement le risque de transmission croisée d'infections dans les établissements de santé si elle est correctement mise en place.

Pour cette raison, un protocole d'antisepsie regroupant un ensemble de gestes consécutifs précis doit être scrupuleusement observé et appliqué.

Les gels antiseptiques pour les mains à base d'alcool (contenant au moins 60% d'alcool) sont largement utilisés dans le domaine médical mais sont désormais également recommandés pour le grand public.

Dans un hôpital, de nombreuses situations nécessitent l'utilisation répétée d'agents antimicrobiens (par exemple, avant des procédures invasives, lors de la prise en charge de patients immunodéprimés, dans les zones de soins intensif, etc.). Ceux-ci doivent être choisis avec soin en fonction de leurs ingrédients actifs et de leurs caractéristiques.



MEDALKAN a développé deux gels antiseptiques à base d'alcool, NOSODERM GEL 70 et NOSODERM GEL 80. Leurs compositions ont été préparées avec une attention particulière pour allier efficacité et protection de la peau. Une peau abîmée étant une porte ouverte aux micro-organismes, un gel antiseptique performant doit prévenir le dessèchement en optimisant l'hydratation de la peau.

Procédure standard de friction des mains



Etape 1

Paume contre paume



Etape 2

Paume de la main droite sur le dos de la main gauche puis inversement (5 fois)



Etape 3

Paume contre paume avec les doigts entrelacés (5 fois)



Etape 4

Dos des doigts contre la paume opposée avec les doigts entrelacés (5 fois)



Etape 5

Friction rotative du pouce droit dans la paume gauche puis inversement (5 fois)



Etape 6

Les doigts de la main droite joints, effectuer des frottements rotatifs d'avant en arrière contre la paume gauche puis inversement (5 fois)

NOSODERM[®] GEL

Gels hydroalcooliques pour l'hygiène des mains

Formules non grasses et non collantes

Laisse la peau propre, fraîche et douce



NOSODERM GEL 70 et NOSODERM GEL 80 ont un pH neutre et ont été testés dermatologiquement sur les peaux sensibles.

NOSODERM GEL 80

Gel antiseptique hydroalcoolique pour les mains

NOSODERM GEL 80 est un gel antiseptique à large spectre antimicrobien. Il contient 80% d'alcool éthylique. Enrichi en principes actifs hydratants, il préserve le film hydrolipidique cutané et permet ainsi un usage répété.

Son utilisation est recommandée pour l'antisepsie:

- Pré et post opératoire
- Avant et après contact direct d'un patient ou de son environnement immédiat
- Après contact avec du sang, des liquides organiques ou des surfaces contaminées
- Avant un geste aseptique ou invasif (prélèvements, injections, poses de voies veineuses, pansements, etc.)

Composition

Alcool denat, Aqua (Water), Propanediol, Glycerin, Acrylates/C10-30 Alkyl acrylate cross polymer, Myristyl alcohol, Panthenol.

NOSODERM GEL 80 est un produit biocide.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

NOSODERM GEL 70

Gel hydroalcoolique pour les mains

NOSODERM GEL 70 est un gel nettoyant pour les mains à action antiseptique douce. Il contient 70% d'alcool éthylique. Sa composition hydratante prévient le dessèchement cutané et procure une agréable sensation de fraîcheur et de propreté.

Propriétés

- Contient 70% (v/v) d'alcool éthylique
- Dermatologiquement testé sur les peaux sensibles
- pH neutre
- Protège l'intégrité du film hydrolipidique et limite la perte d'hydratation
- Laisse la peau propre, fraîche et douce

Propriétés microbiologiques

SPECTRE D'ACTIVITE	NORME	SOUICHE MICROBIENNE	TEMPS DE CONTACT
BACTERICIDE*	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Escherichia coli Enterococcus hirae	15 sec.
FONGICIDE	EN 13624	Candida Albicans	15 sec.
VIRUCIDE**	EN 14476	Adenovirus, Norovirus Polyovirus	30 sec. 60 sec.
TUBERCULOCIDE	EN 14348	Mycobacterium Terrae (Surrogate. M. tuberculosis)	30 sec.
MYCOBACTERICIDE	EN 14348	Mycobacterium Terrae Mycobacterium Avium	30 sec.
FRICITION HYGIENIQUE DES MAINS Test d'efficacité réalisé en conditions réelles	EN 1500 (Phase 2 / Etape 2)	Escherichia coli	30 sec.
DESINFECTION CHIRURGICALE DES MAINS - Test d'efficacité réalisé en conditions réelles	EN 12791 (Phase 2 / Etape 2)	Resident microbial flora	2 x 60 sec.

* Y compris toutes les souches résistantes aux antibiotiques telles que Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, streptococcus pneumoniae, etc

** Y compris tous les virus enveloppés tels que BVDV, Vaccinia, VHB, VIH, VHC, Ebola, Herpès, Influenza H1N1, H5N1, Coronavirus

NOSODERM GEL 80 - Conditionnement

- Flaçon de 500 ml. avec pompe (Ref. 20053)
- Flaçon de 1 litre avec capuchon rabattable (Ref. 20055)
- Bidon de 5 Litres (Ref. 20054)

NOSODERM GEL 70 - Conditionnement

- Flaçon de 80 ml. avec capuchon rabattable (Ref. 20044)
- Flaçon de 500 ml. avec pompe (Ref. 20040)
- Flaçon de 1 litre avec capuchon rabattable (Ref. 20041)
- Bidon de 5 litres (Ref. 20045)

Accessoires optionnels (disponibles pour les deux gels)

- Pompe doseuse pour flaçon de 1 litre (Ref. 20046)
- Distributeur 500 ml. automatique autonome ou mural (Ref. 20047)
- Distributeur mural avec commande au coude (Ref. 20048)

Composition

Alcool denat, Aqua (Water), Propanediol, Glycerin, Acrylates/C10-30 Alkyl acrylate cross polymer, Myristyl alcohol, Dicaprylyl carbonate, Tetrahydroxypropyl ethylenediamine, Bisabolol, Panthenol, Dimethicone.

NOSODERM GEL 70 est enregistré comme produit cosmétique
N° d'enregistrement C.P.N.P.: 3642922.

07

NOSOSEPT® 100

Spray désinfectant rapide pour surfaces et équipements médicaux



NOSOSEPT 100 est un spray désinfectant à large spectre d'activité antimicrobienne spécialement conçu pour le nettoyage et la désinfection rapide des surfaces de dispositifs médicaux. Actif dès 30 secondes, son utilisation après chaque consultation permet d'éviter la contamination croisée entre les patients.

Il est recommandé pour les surfaces des dispositifs médicaux en contact direct avec les patients et le personnel médical telles que chariots, paillasse, tables d'examen, mobilier de bloc opératoire, etc.

NOSOSEPT 100 possède d'excellentes propriétés désinfectantes, une odeur légère et ne laisse pas de traces après séchage.

Propriétés

- Actif dès 30 secondes
- Ne laisse pas de traces après séchage
- N'affecte pas l'équipement médical
- Ne laisse pas de traces après séchage
- Bactéricide, fongicide, tuberculocide, mycobactéricide
- Virucide (HBV, HCV, HIV, Herpès, Vaccinia, BVDV, Influenza, Ebola, Coronavirus, Rotavirus)
- Ne contient pas de phénols, aldéhydes, chlore ou EDTA

Propriétés microbiologiques

SPECTRE D'ACTIVITE	NORME	SOUICHE MICROBIENNE	TEMPS DE CONTACT
BACTERICIDE* (Conditions de saleté)	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	30 sec.
FONGICIDE (Conditions de saleté)	EN 13624	Candida Albicans Aspergillus Brasiliensis (Fongicide)	30 sec. 5 min.
VIRUCIDE (Conditions de saleté)	DVV ⁽¹⁾ /RKI ⁽²⁾ 2014	BVDV, Vaccinia, HBV, HIV, HCV, Ebola, Herpes, Influenza H1N1, H5N1, Coronavirus	30 sec.
	EN 14476	Rotavirus	
TUBERCULOCIDE (Conditions de saleté)	EN 14348	Mycobacterium Terrae (Substitut M. tuberculosis)	3 min.
MYCOBACTERICIDE (Conditions de saleté)	EN 14348	Mycobacterium Terrae Mycobacterium Avium	3 min.

* Y compris toutes les souches résistantes aux antibiotiques telles que Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, streptococcus pneumoniae, etc.

1) DVV: Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (Association allemande pour le contrôle des maladies virales)

2) RKI: Robert Koch Institute – Autorité fédérale allemande de la santé

Certifications

- Marquage CE selon la directive relative aux dispositifs médicaux (Directive 93/42 / CEE)
- Dispositif médical de classe IIa



Conditionnement

- Spray de 1 litre (Ref. 20003)
- Recharge de 5 litres (Ref. 20004)

Propriétés physiques

- Apparence: Solution transparente
- Densité: 0.97 g/cm³ à 20°C
- pH: 9.0-9.6 à 20°C
- Odeur: Légère (alcool)
- Stockage: 5°C - 35°C
- Stabilité: 3 ans
- Biodégradabilité: Selon OCDE 301D

Composition

Alcool isopropylique, chlorure de didécyl-diméthylammonium, N-(3-aminopropyl)-N dodécylpropano-1,3-diamine, excipients

Compatibilité

Sa formulation spécifique contenant un faible degré d'alcool permet une compatibilité avec les matériaux sensibles tout en maintenant une action désinfectante ultra rapide.

NOSOFAST TB®

Spray moussant désinfectant pour surfaces de l'équipement médical

Sans alcool

NOSOFAST TB est un spray moussant désinfectant à large spectre d'activité antimicrobienne. Il combine d'excellentes propriétés de nettoyage et de désinfection et assure la protection des patients et du personnel.

Sa formulation sans alcool est idéale pour la désinfection rapide des surfaces sensibles telles qu' incubateurs, moniteurs, fauteuils de diagnostic, plexiglas, similicuir, etc. Il convient également aux dispositifs médicaux tels que lits, civières, chariots, et autres surfaces.

NOSOFAST TB ne laisse aucun résidu après séchage, est inodore et n'affecte pas l'équipement médical.

Propriétés

- Ne laisse aucun résidu après séchage
- N'affecte pas l'équipement médical
- Virucide contre tous les virus enveloppés VHB, VIH, VHC, herpès, vaccinia, BVDV, Influenza H1N1, H5N1, Ebola, Coronavirus ...) en 2 minutes
- Bactéricide, fongicide, tuberculocide, mycobactéricide
- Sans phénols, aldéhydes, chlore ou EDTA

Propriétés microbiologiques

SPECTRE D'ACTIVITE	NORME	SOUICHE MICROBIENNE	TEMPS DE CONTACT
BACTERICIDE* (Conditions de saleté)	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	30 sec.
FONGICIDE (Conditions de saleté)	EN 13624	Candida Albicans	30 sec.
VIRUCIDE (Conditions de saleté)	DVV ⁽¹⁾ /RKI ⁽²⁾ 2014	BVDV, Vaccinia, HBV, HIV, HCV, Ebola, Herpes, Influenza H1N1, H5N1, Coronavirus	2 min.
TUBERCULOCIDE (Conditions de saleté)	EN 14348	Mycobacterium Terrae (Substitut M. tuberculosis)	15 min.
MYCOBACTERICIDE (Conditions de saleté)	EN 14348	Mycobacterium Terrae Mycobacterium Avium	15 min.

* Y compris toutes les souches résistantes aux antibiotiques telles que Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, streptococcus pneumoniae, etc.

1) DVV: Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (Association allemande pour le contrôle des maladies virales)

2) RKI: Robert Koch Institute – Autorité fédérale allemande de la santé

Certifications

- Marquage CE selon la directive relative aux dispositifs médicaux (Directive 93/42/CEE)
- Dispositif médical de classe IIa



Conditionnement

- Spray de 1 litre (Ref. 20042)
- Recharge de 5 litres (Ref. 20043)

Propriétés physiques

- Aspect: Solution transparente
- Densité: 0.99 g/cm³ à 20°C
- pH: 9.5-10.5 à 20°C
- Odeur: Neutre
- Stockage: 5°C - 35°C
- Stabilité: 3 ans
- Biodégradabilité: Selon OCDE 301D

Composition

N- (3-aminopropyl) -N-dodécylpropano-1,3-diamine, tensioactifs non ioniques <5%, inhibiteur de corrosion, régulateur de pH, excipients

Compatibilité

NOSOFAST TB est compatible avec la plupart des matériaux tels que l'acier inoxydable, l'aluminium, le verre, la céramique, les plastiques, l'ébonite, etc.

NOSOFLOOR®

Détergent désinfectant ultraconcentré pour surfaces de l'équipement médical

NOSOFLOOR est une solution concentrée de haute efficacité pour le nettoyage et la désinfection quotidienne des surfaces de dispositifs médicaux dans les hôpitaux, cliniques et autres établissements de santé. Son utilisation est recommandée pour la désinfection de routine journalière dans les salles d'opération, les unités de soins intensifs, les salles blanches et les zones proches du patient.

NOSOFLOOR combine un large spectre d'activité antimicrobienne et un excellent pouvoir nettoyant.

Ses propriétés tuberculocide et mycobactéricide sont particulièrement indiquées pour un usage quotidien dans les cliniques dentaires où les projections de salive sont nombreuses et représentent un risque élevé de contamination.

NOSOFLOOR présente une excellente compatibilité avec la plupart des revêtements de surface tels que matières plastifiées, acier inoxydable, verre, céramique, etc.



Propriétés

- Bactéricide, fongicide, tuberculocide, mycobactéricide
- Virucide (VIH, VHB, VHC, Herpès, Vaccinia, BVDV, Influenza, Ebola, Coronavirus...)
- Excellente efficacité détergente
- Très économique: dilution de 0,25% à 1%
- N'affecte pas l'équipement médical
- Aucun résidu après séchage
- Formulé sans phénols, aldéhydes, chlore ou EDTA

Propriétés microbiologiques

SPECTRE D'ACTIVITE	NORME	SOUCHE MICROBIENNE	TEMPS DE CONTACT
BACTERICIDE* (Conditions de saleté)	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	0.25% - 5 Min.
FONGICIDE (Conditions de saleté)	EN 13624	Candida Albicans	0.25% - 5 Min.
VIRUCIDE (Conditions de saleté)	DVV ⁽¹⁾ /RKI ⁽²⁾ 2014	BVDV, Vaccinia, HBV, HIV, HCV, Ebola, Herpes, Influenza H1N1, H5N1, Coronavirus	1% - 15 Min. 0.75% - 30 Min.
TUBERCULOCIDE (Conditions de saleté)	EN 14348	Mycobacterium Terrae (Substitut pour M. tuberculosis)	2% - 15 Min. 1% - 60 Min.
MYCOBACTERICIDE (Conditions de saleté)	EN 14348	Mycobacterium Terrae Mycobacterium Avium	1% - 60 Min.

* Y compris toutes les souches résistantes aux antibiotiques telles que Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, streptococcus pneumoniae, etc.

1) DVV: Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (Association allemande pour le contrôle des maladies virales)

2) RKI: Robert Koch Institute - Autorité fédérale allemande de la santé

Conditionnement

- Bidon de 5 litres (Ref. 20025)
- Pompe-doseuse pour bidon de 5 litres (Ref. 20023)

Propriétés physiques

- Apparence: Solution transparente rosée
- Densité: 0.98 g/cm³ à 20°C
- pH: 12.2-12.8 à 20°C
- pH (1%): 9.5-10.3 à 20°C
- Odeur: Légère essence d'eucalyptus
- Stockage: 5°C - 35°C
- Stabilité: 3 ans
- Biodégradabilité: Selon OCDE 301D

Compatibilité

NOSOFLOOR est compatible avec la plupart des matériaux tels que l'acier inoxydable, l'aluminium, le verre, la céramique, les plastiques, linoléum, ébonite, etc.

Composition

Didecyldiméthylammonium chloride, N- (3-aminopropyl) -N dodecylpropano-1,3-diamine, isopropanol, surfactants non-ioniques <5%, agent chélatant, inhibiteurs de corrosion, régulateur de pH, anti-mousse, excipients.

Certifications

- Marquage CE conformément à la directive 93/42/CEE pour les dispositifs médicaux
- Dispositif médical de classe IIa

Traitement des endoscopes

Le processus de nettoyage



Les endoscopes sont largement utilisés en tant qu'outil diagnostique et thérapeutique précieux; cependant, il a été rapporté que les épidémies d'infections associées aux soins de santé peuvent être plus fréquemment liées à des endoscopes contaminés qu'à tout autre dispositif médical.

Les endoscopes sont en contact avec différents fluides corporels et les canaux offrent une surface idéale pour l'adhésion bactérienne. Des cellules bactériennes viables peuvent être détectées sur de nombreux endoscopes même après les processus de nettoyage et de désinfection.

La principale raison réside dans le fait que la plupart des bactéries se présentent sous la forme de biofilms dans des conditions naturelles.

Ils adhèrent aux surfaces et sont intégrés dans une couche auto-produite de substances polymères extracellulaires (EPS). L'EPS fournit une intégrité structurelle aux biofilms et protège les bactéries contre les influences environnementales telles que l'irradiation UV, les antibiotiques et la désinfection et les rend beaucoup plus tolérantes à ces contraintes. Empêcher la formation de biofilms ou procéder à leur élimination représente un énorme défi, en particulier dans les environnements humides tels que les canaux d'endoscopes.

Le nettoyage est l'étape cruciale du traitement des endoscopes.

Il consiste en un nettoyage mécanique des surfaces internes et externes de l'endoscope. Celles-ci doivent être minutieusement brossées à l'aide d'une solution détergente puis rincées abondamment à l'eau adoucie. Le but du nettoyage est l'élimination de toutes les matières organiques et inorganiques des surfaces internes et externes des endoscopes flexibles.

Si les étapes de nettoyage manuel, brossage et rinçage, ne sont pas correctement effectuées, les résidus protéiniques peuvent durcir et entraîner la formation de biofilm à l'intérieur de la chaîne de biopsie de l'endoscope. Si le nettoyage se révèle inadéquat, des résidus de matière peuvent alors subsister sur les surfaces de l'endoscope empêchant le désinfectant d'atteindre l'intégralité des surfaces contaminées.

Pour cette raison, il est essentiel de procéder au nettoyage des endoscopes avec un détergent enzymatique immédiatement après leur utilisation et précédant l'étape de désinfection de haut niveau.

NOSOZYM et **NOSOZYM 6 PLUS** contiennent une combinaison d'enzymes spécifiques hautement stabilisées. Ces enzymes décomposent les souillures en minuscules fragments solubles dans l'eau facilitant ainsi leur élimination par rinçage.

Utiliser **NOSOZYM** ou **NOSOSYM 6 PLUS** pour le nettoyage des endoscopes:

- manuellement
- en laveur automatique (toujours suivre les instructions du fabricant du laveur)

NOSOZYM et **NOSOZYM 6 PLUS** sont compatibles avec les endoscopes **OLYMPUS®**, **FUJINON®** et **KARL STORZ®**. Ils ont été testés et approuvés par **PENTAX MEDICAL®**.

NOSOZYM®

Détergent tri-enzymatique pour endoscopes et instruments chirurgicaux

NOSOZYM est un détergent enzymatique concentré très efficace pour instruments chirurgicaux et endoscopes.

NOSOZYM contient une combinaison d'enzymes (protéase, lipase, amylase) qui dégradent les protéines, les graisses et les résidus sanguins. Cette synergie d'enzymes élimine le biofilm des surfaces internes et externes des chaînes de biopsie des endoscopes.

Sa formulation non moussante et au pH neutre est totalement adaptée au nettoyage des endoscopes flexibles.

NOSOZYM peut être utilisé en bain à ultrasons, dans les laveurs automatiques pour endoscopes et instruments ou en bac d'immersion.

NOSOZYM est compatible avec les endoscopes OLYMPUS®, KARL STORZ®, FUJINON® et PENTAX MEDICAL®.

Propriétés

- Dernière génération d'enzymes pour une meilleure efficacité
- Dissout les résidus organiques
- Dissout le biofilm
- Très économique
- Ne mousse pas
- Protège les instruments de la corrosion et de la décoloration
- Compatible avec les instruments thermosensibles
- Sans aldéhydes, phénols, chlore ou EDTA

Composition

Protéase, lipase, amylase, surfactants non-ioniques <5%, inhibiteurs de corrosion, régulateur de pH, excipients.

Compatibilité

NOSOZYM est compatible avec la plupart des matériaux tels que l'acier inoxydable, l'aluminium, le verre, la céramique, les plastiques durs, l'ébonite, etc.

Bac à ultrasons

NOSOZYM peut être utilisé dans tous types communs de bacs à ultrasons. Ne pas dépasser une température de 60°C.

Certifications

- Marquage CE conformément au règlement MDR (EU 2017/745) relatif aux dispositifs médicaux
- Dispositif médical de classe I



Conditionnement

- Bidon de 5 litres (Ref. 20022)
- Pompe doseuse pour bidon de 5 litres (Ref. 20023)

Propriétés physiques

- Apparence: Solution transparente orangée
- Densité: 1.02 g/cm³ à 20°C
- pH: 7.0-8.0 (neutre) à 20°C
- pH (0,5% - 1%): 7.0-8.0 (neutre) à 20°C
- Odeur: Neutre
- Stockage: 5°C - 35°C
- Stabilité: 3 ans
- Biodégradabilité: Selon OCDE 301D

Recommandations et dosages

METHODE DE NETTOYAGE	DOSAGE RECOMMANDE (%) *	DOSAGE RECOMMANDE (ml/l)	TEMPERATURE DE L'EAU (°C)	TEMPS DE CONTACT
EN BAC D'IMMERSION	0,5% - 1%	5 ml/l - 10 ml/l	20 - 60°C	1 - 10 min
EN BAC A ULTRASON	0,2% - 0,5%	2 ml/l - 5 ml/l	45 - 60°C	1 - 5 min
EN LAVEUR AUTOMATIQUE	0,15% - 0,5%	1,5 ml/l - 5 ml/l	45 - 60°C	1 - 5 min **

* Toujours ajuster le dosage et le temps de contact en fonction du degré de souillures et de la méthode de nettoyage. Les dosages recommandés peuvent être ajustés ou dépassés en fonction de la qualité et de la température de l'eau et du type de laveur utilisé.

** Dépend des recommandations du fabricant de laveurs.

NOSOZYM 6 PLUS[®]

Détergent plurienzymatique pour instruments chirurgicaux et endoscopes

NOSOZYM 6 PLUS est un détergent plurienzymatique ultra-concentré spécialement formulé pour le nettoyage des endoscopes et des instruments chirurgicaux.

Grâce à la synergie de 7 enzymes (protéase, lipase, amylase, pectase, mannanase et cellulases), il dissout très rapidement tous types de résidus organiques tels que protéines, lipides, amidon, cellulose, polysaccharides et dépôts de sang.

Il élimine le biofilm efficacement tout en préservant l'intégrité des matériaux.

NOSOZYM est compatible avec les endoscopes OLYMPUS[®], KARL STORZ[®], FUJINON[®] et PENTAX MEDICAL[®].

NOSOZYM 6 PLUS peut être utilisé en bac à ultrasons, en bac d'immersion ou dans les laveurs automatiques.

Propriétés

- Synergie d'enzymes hautement stabilisées pour une efficacité renforcée
- Dissout efficacement tous types de résidus organiques
- Dissout le biofilm
- Très économique
- Non moussant
- Protège les instruments de la corrosion et de la décoloration
- Compatible avec les instruments thermosensibles

Composition

Protéase, lipase, amylase, pectase, mannanase, cellulases, tensioactifs non ioniques <5%, inhibiteur de corrosion, régulateur de pH, excipients.

Compatibilité

NOSOZYM 6 PLUS est compatible avec la plupart des matériaux tels que acier inoxydable, aluminium, verre, céramique, plastiques, ébonite etc.

Bac à ultrasons

NOSOZYM 6 PLUS peut être utilisé dans tous types communs de bacs à ultrasons. Ne pas dépasser une température de 60°C.

Certifications

- Marquage CE conformément au règlement MDR (EU 2017/745) relatif aux dispositifs médicaux
- Dispositif médical de classe I



Conditionnement

- Bidon de 5 litres (Ref. 20033)
- Pompe doseuse pour bidon de 5 litres (Ref. 20023)

Propriétés physiques

- Apparence: Solution transparente orangée
- Densité: 1.02 g/cm³ à 20°C
- pH: 7.0-8.0 (neutre) à 20°C
- pH (0,5% -1%): 7.0-8.0 (neutre) à 20°C
- Odeur: Léger parfum citron-menthe
- Stockage: 5°C - 35°C
- Stabilité: 3 ans
- Biodégradabilité: Selon OCDE 301D

Recommandations et dosages

METHODE DE NETTOYAGE	DOSAGE RECOMMANDE (%) *	DOSAGE RECOMMANDE (ml/l)	TEMPERATURE DE L'EAU (°C)	TEMPS DE CONTACT
EN BAC D'IMMERSION	0,2% - 0,5%	2 ml/l - 5 ml/l	20 - 60°C	1 - 5 min
EN BAC A ULTRASONS	0,2% - 0,5%	2 ml/l - 5 ml/l	45 - 60°C	1 - 5 min
EN LAVEUR AUTOMATIQUE	0,1% - 0,5%	1ml/l - 5 ml/l	45 - 60°C	1 - 5 min **

* Toujours ajuster le dosage et le temps de contact en fonction du degré de souillures et de la méthode de nettoyage. Les dosages recommandés peuvent être ajustés ou dépassés en fonction de la qualité et de la température de l'eau et du type de laveur utilisé.

** Dépend des recommandations du fabricant de laveurs.

Traitement des endoscopes

La désinfection de haut niveau

Le retraitement des endoscopes comporte sept étapes : pré-nettoyage, nettoyage, rinçage, désinfection, rinçage, séchage et enfin stockage.

Une désinfection de haut niveau est recommandée après les processus de nettoyage et de rinçage. L'endoscope et ses composants doivent être complètement immergés dans une solution désinfectante de haut niveau, en veillant à ce que tous les canaux soient bien perfusés.

La sélection des désinfectants de haut niveau doit être basée sur l'approbation de la Conformité Européenne (CE), de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ou de la Korean Food and Drug Administration.

Le temps et la température d'exposition appropriés pour une désinfection de haut niveau sont spécifiques à chaque désinfectant et à sa concentration d'utilisation.

Les produits chimiques couramment utilisés pour la désinfection de haut niveau des endoscopes et autres dispositifs médicaux semi-critiques comprennent les aldéhydes (c'est-à-dire le glutaraldéhyde et l'ortho-phthalaldéhyde) et l'acide peracétique.

TABLEAU COMPARATIF DES SUBSTANCES ACTIVES DE DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU

	GLUTARALDEHYDE (GA)	ORTHO-PHTHALALDEHYDE (OPA)	NOSOCID PAA (PAA)
PERFORMANCE	<ul style="list-style-type: none"> • Coagule le sang et fixe les tissus aux surfaces favorisant la formation de Biofilm • Une évaluation périodique de la fonction pulmonaire des professionnels qui manipulent la solution est requise • Pas d'activation requise • Volatile • Bonne stabilité (14 à 28 jours) 	<ul style="list-style-type: none"> • Volatil, mais beaucoup moins que glutaraldéhyde • La neutralisation du produit est recommandée avant l'élimination • Plus cher que le glutaraldéhyde • Pas d'activation requise • Pas d'odeur irritante • Bonne stabilité (7 à 14 jours) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ne coagule pas le sang et ne fixe pas les tissus aux surfaces • Spectre complet de désinfection en 5 min. • Élimine le biofilm • Aucun effet néfaste sur la santé les opérateurs dans des conditions de fonctionnement normales • Odeur ou irritation non significative • Stérilisation par immersion liquide à basse température • Respectueux de l'environnement • Se décompose en oxygène et en eau • Bonne stabilité (15 jours)
EFFICACITÉ	<ul style="list-style-type: none"> • Activité sporicide et mycobactéricide faible et lente à température ambiante 	<ul style="list-style-type: none"> • Activité faible et lente sur les spores bactériennes à température ambiante 	<ul style="list-style-type: none"> • Stérilisation rapide • Activité sporicide rapide • Spectre complet de désinfection en 5 min. à température ambiante • Sporicide sur Bacillus cereus et sur toutes les spores bactériennes (testé selon la dernière norme EN 17126:2019)*
SÉCURITÉ	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilisant, irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires par les vapeurs de glutaraldéhyde • Ventilation fortement recommandée • Dermatitis de contact allergique • Effets indésirables pour les patients après rinçage insuffisant des dispositifs médicaux • Peut provoquer une colite chez les patients • L'impact négatif des aldéhydes sur la santé humaine est bien documenté. • Les mesures de santé et de sécurité environnementales coûtent cher 	<ul style="list-style-type: none"> • Irritant pour les yeux et les voies respiratoires • Tache la peau • Peu de données sur les dangers de l'exposition à long terme et sur les niveaux d'exposition sans danger • Réactions anaphylactiques avec cystoscopies répétées chez les patients cancéreux 	<ul style="list-style-type: none"> • Irritant en cas de contact avec les yeux • Aucun autre effet indésirable
COMPATIBILITÉ DES MATERIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Excellente compatibilité des matériaux 	<ul style="list-style-type: none"> • Excellente compatibilité des matériaux 	<ul style="list-style-type: none"> • Excellente compatibilité des matériaux

MEDALKAN a formulé **NOSOCID PAA**, désinfectant de haut niveau à base d'acide peracétique et de peroxyde d'hydrogène pour la stérilisation à froid des instruments thermosensibles et des endoscopes. Composée d'une solution de base et d'un activateur, la solution mixte est prête à l'emploi et stable pour une durée de 15 jours. La concentration en acide peracétique est facile à vérifier avec les bandelettes de contrôle **NOSOCID PAA - TEST STRIPS** pour assurer une efficacité optimale.

NOSOCID PAA offre un spectre complet d'activité antimicrobienne (bactéricide, fongicide, entièrement virucide, tuberculocide, mycobactéricide et sporicide*) en 5 minutes seulement.

14

* **NOSOCID PAA** a été testé selon la norme DIN EN 17126:2019, dernière norme applicable en matière d'évaluation de l'activité sporicide des désinfectants chimiques dans le domaine médical.

NOSOCID PAA®

Désinfectant de haut niveau à base d'acide peracétique

NOSOCID PAA est un désinfectant de haut niveau spécialement formulé pour la stérilisation à froid des instruments thermosensibles et des endoscopes. Il est basé sur une synergie d'acide peracétique et de peroxyde d'hydrogène.

Il combine un large spectre d'activité antimicrobienne, des temps d'action rapides et une excellente compatibilité avec les matériaux.

Son utilisation est recommandée pour tous types d'endoscopes (bronchoscopes, gastroscopes, duodénoscopes, nasolaryngo-pharyngoscopes, laparoscopes, etc.), instruments chirurgicaux, dispositifs médicaux anesthésiques et thermosensibles.

NOSOCID PAA ne fixe pas les protéines, élimine le biofilm et désinfecte même en présence de matières organiques. Formulé avec des inhibiteurs de corrosion très efficaces, il préserve l'intégrité des matériaux communs d'endoscopes.

Propriétés

- Solution prête à l'emploi
- Désinfecte même en présence de protéines
- Compatible avec la plupart des matériaux sensibles
- Compatible avec les instruments thermosensibles
- Activité antimicrobienne totale en seulement 5 minutes
- Stabilité de la solution prête à l'emploi: 15 jours
- Vérification facile de la concentration en PAA à l'aide des bandelettes de test
- Sans aldéhydes, sécurité optimisée pour l'utilisateur
- Se décompose en eau et en oxygène

Propriétés microbiologiques

SPECTRE D'ACTIVITE	NORME	SOUCHES MICROBIENNES	TEMPS DE CONTACT
BACTERICIDE* (Conditions de propreté)	EN 13727:2012 + A2:2015 (phase 2 / étape 1) EN 14561:2006 (phase 2 / étape 2)	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	5 Min.
FONGICIDE (Conditions de propreté)	EN 13624:2013 (phase 2 / étape 1) EN 14562:2006 (phase 2 / étape 2)	Candida Albicans Aspergillus Brasiliensis	5 Min.
VIRUCIDE** (Conditions de propreté)	EN 14476:2013 + A2:2019 (phase 2 / étape 1)	Adenovirus, Norovirus Polyovirus	5 Min.
TUBERCULOCIDE (Conditions de propreté)	EN 14348:2005 (phase 2 / étape 1) EN 14563:2009 (phase 2 / étape 2)	Mycobacterium Terrae (Surrogate M. tuberculosis)	5 Min.
MYCOBACTERICIDE (Conditions de propreté)	EN 14348:2005 (phase 2 / étape 1) EN 14563:2009 (phase 2 / étape 2)	Mycobacterium Terrae Mycobacterium Avium	5 Min.
SPORICIDE*** (Conditions de propreté)	EN 17126:2019 (phase 2 / étape 1)	Bacillus subtilis Clostridioides difficile Bacillus cereus	5 Min.

* Y compris toutes les bactéries résistantes aux antibiotiques telles que Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, etc.)

** Y compris les virus enveloppés tels que BVDV, Vaccinia, HBV, HIV, HCV, Ebola, Herpes, Influenza H1N1, H5N1, Coronavirus

*** NOSOCID PAA a été testé selon la norme DIN EN 17126:2019, dernière norme applicable en matière d'évaluation de l'activité sporicide des désinfectants chimiques dans le domaine médical

NOSOCID PAA est fabriqué dans l'Union Européenne. **MEDALKAN** satisfait aux exigences du système de qualité **ISO 9001:2015** et aux exigences de la norme **ISO 13485:2016** pour la conception et la fabrication de dispositifs médicaux.



Conditionnement

- Bidon de 5 litres (base + activateur) - Ref. 20050
- Bandelettes de test pour NOSOCID PAA - Ref. 20051 (tube de 50 bandelettes)

Propriétés physiques

- Apparence: Solution transparente
- Densité: 1,02 g/cm³ à 20°C
- pH: 4.5-6.0 (neutre) à 20°C
- Odeur: Légère (acide acétique)
- Stockage: 5°C - 35°C
- Stabilité: 24 mois
- Biodégradabilité: Selon OCDE 301D

Compatibilité

NOSOCID PAA est compatible avec la plupart des matériaux tels qu'acier inoxydable, polycarbonates, polyuréthanes, polysulfones, polyéthylènes, aluminium, verre, silicones, plastiques durs, élastomères.

NOSOCID PAA n'est pas compatible avec le cuivre, le fer et le laiton. La compatibilité avec les matériaux sensibles et les alliages plaqués doit être testée avant utilisation.

Des tests de corrosion ont été effectués par un laboratoire national indépendant afin de garantir la sécurité et la transparence. Le rapport de test est disponible sur demande.

Composition

Acide peracétique, peroxyde d'hydrogène, acide acétique, inhibiteurs de corrosion, régulateur de pH, excipients.

Certifications

- Marquage CE conformément à la directive 93/42/CEE pour les dispositifs médicaux
- Dispositif médical de classe IIb

La désinfection des instruments

L'importance de la pré-désinfection

La désinfection et la stérilisation sont essentielles pour garantir que les instruments médicaux et chirurgicaux ne transmettent pas d'agents pathogènes infectieux aux patients.

Le nettoyage doit toujours précéder la désinfection de haut niveau et la stérilisation. Les directives actuelles de désinfection et de stérilisation doivent être strictement observées.

Une procédure de pré-désinfection est fortement recommandée pour les dispositifs médicaux réutilisables et immergeables avant stérilisation.



Elle consiste à plonger les instruments chirurgicaux souillés dans une solution détergente et désinfectante de type **NOSOPROTECT** avant leur retraitement au Service Central de Stérilisation (CSSD). Cette procédure de trempage doit être effectuée le plus tôt possible et le plus près possible de la salle d'opération.

Si la distance entre le bloc opératoire et le CSSD est réduite, le trempage des instruments peut se faire directement dans le CSSD. Si la distance est trop longue, les instruments souillés doivent être prétraités immédiatement après usage et maintenus hydratés par une solution désinfectante pulvérisable de type **NOSOPROTECT 100** afin de limiter le risque de transmission entre le bloc opératoire et le CSSD.

Ainsi, MEDALKAN a formulé:

- **NOSOPROTECT**, désinfectant mycobactéricide ultraconcentré pour instruments chirurgicaux
- **NOSOPROTECT 100**, spray moussant détergent et désinfectant pour instruments chirurgicaux

Ils combinent tous deux une action nettoyante puissante avec un large spectre d'activité antimicrobienne (dont la tuberculose et les mycobactéries).

Sachant que les instruments médicaux et chirurgicaux représentent un investissement important pour tout établissement de santé, **NOSOPROTECT** et **NOSOPROTECT 100** ont été développés avec une attention particulière pour leur compatibilité avec les matériaux sensibles et leur protection contre la corrosion et la décoloration.

NOSOPROTECT®

Désinfectant mycobactéricide ultraconcentré pour instruments chirurgicaux

NOSOPROTECT est un désinfectant mycobactéricide ultraconcentré pour l'instrumentation.

Il allie une excellente efficacité de nettoyage et de désinfection et démontre un large spectre d'activité antimicrobienne (incluant tuberculose et mycobactéries). Il élimine efficacement les résidus de souillures organiques tels que sang, lipides, polysaccharides, etc.

Sa formule spécifique est parfaitement adaptée aux matériaux thermosensibles. Il peut être utilisé sur tout type d'instrument chirurgical (scalpels, curettes, pinces, ciseaux...) ou médical (spéculum, miroirs, stéthoscope, etc.). Il protège les instruments de la corrosion et de la décoloration.

Son utilisation est indiquée pour les bacs à ultrasons et les bacs d'immersion.

Propriétés

- Très économique: dilution entre 0,25% et 1%
- Élimine efficacement résidus organiques
- Contribue à l'élimination du biofilm
- Bactéricide, levuricide, tuberculocide, mycobactéricide
- Virucide ((HBV, HIV, HCV, Herpes, Vaccinia, BVDV, Influenza, Ebola, Coronavirus...))
- Protège les instruments de la corrosion et la décoloration
- Formulé sans phénols, aldéhydes, chlore ou EDTA

Propriétés microbiologiques

SPECTRE D'ACTIVITE	NORME	SOUCHÉ MICROBIENNE	DOSAGE ml/l - %	TEMPS DE CONTACT
BACTERICIDE* (Conditions de saleté)	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	2,5 ml/l - 0.25%	5 Min.
FONGICIDE (Conditions de saleté)	EN 13624	Candida Albicans	2,5 ml/l - 0.25%	5 Min.
VIRUCIDE (Conditions de saleté)	DVV ⁽¹⁾ / RKI ⁽²⁾ 2014	BVDV, Vaccinia, HBV, HIV, HCV, Ebola, Herpes, Influenza H1N1, H5N1, Coronavirus	10 ml/l - 1%	15 Min.
			7,5 ml/l - 0.75%	30 Min.
TUBERCULOCIDE (Conditions de saleté)	EN 14348	Mycobacterium Terrae (Substitut pour M. tuberculosis)	20 ml/l - 2%	15 Min.
			10 ml/l - 1%	60 Min.
MYCOBACTERICIDE (Conditions de saleté)	EN 14348	Mycobacterium Terrae Mycobacterium Avium	10 ml/l - 1%	60 Min.

* Y compris toutes les souches résistantes aux antibiotiques telles que Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, streptococcus pneumoniae, etc.

1) DVV: Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (Association allemande pour le contrôle des maladies virales)

2) RKI: Robert Koch Institute - Autorité fédérale allemande de la santé

Certifications

- Marquage CE conformément à la directive 93/42/CEE pour les dispositifs médicaux
- Dispositif médical de classe IIb



Conditionnement

- Bidon de 5 litres (Ref. 20012)
- Pompe doseuse pour bidon de 5 litres (Ref. 20023)

Propriétés physiques

- Apparence: Solution transparente
- Densité: 0.99 g/cm³ à 20°C
- pH: 12.0-12.8 à 20°C
- pH (1%): 9.5-10.5 à 20°C
- Odeur: Neutre
- Storage: 5°C - 35°C
- Stability: 3 Years
- Biodegradability: according to OCDE 301D

Bac à ultrasons

NOSOPROTECT peut être utilisé dans tous types communs de bacs à ultrasons.

Compatibilité

NOSOPROTECT est compatible avec la plupart des matériaux tels que l'acier inoxydable, l'aluminium, le verre, la céramique, les plastiques durs, l'ébonite, etc.

NOSOPROTECT n'est pas compatible avec les préparations désinfectantes contenant des aldéhydes.

Composition

N- (3-aminopropyl) -N dodécylpropano-1,3-diamine, chlorure de didécyl diméthyl ammonium, tensioactifs non ioniques <5%, isopropanol, inhibiteur de corrosion, agent anti-mousse, excipients.

NOSOPROTECT 100®

Spray moussant détergent et désinfectant pour instruments chirurgicaux

NOSOPROTECT 100 est une mousse détergente désinfectante utilisée pour la pré-désinfection rapide des instruments chirurgicaux immédiatement après leur utilisation.

NOSOPROTECT 100 maintient les instruments humides, protège de la corrosion et empêche ainsi les résidus organiques tels que le sang et les protéines de sécher.

Il rend le traitement des instruments considérablement plus sûr et plus facile et réduit le risque d'infection entre la salle d'opération et le Service de stérilisation centrale.

NOSOPROTECT 100 contient un complexe d'enzymes hautement stabilisées, de tensioactifs, d'amines et d'inhibiteurs de corrosion. Cette formulation spécifique garantit une grande efficacité tout en protégeant les matériaux sensibles.

NOSOPROTECT 100 ne contient pas d'alcool, de composés d'ammonium quaternaire, de phénols, d'aldéhydes, de chlore, d'EDTA, de parfums ou de colorants.



Propriétés

- Solution moussante prête à l'emploi
- Excellent pouvoir nettoyant et désinfectant
- Maintient les instruments humides
- Protège les instruments de la corrosion et de la décoloration
- Bactéricide, levuricide, tuberculocide, mycobactéricide
- Virucide (HBV, HCV, HIV, Herpès, Vaccinia, BVDV, Influenza, Ebola, Coronavirus, ...)
- Compatibilité avec la plupart des matériaux même sensibles

Propriétés microbiologiques

SPECTRE D'ACTIVITE	NORME	SOUCHE MICROBIENNE	TEMPS DE CONTACT
BACTERICIDE* (Conditions de sécurité)	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	5 Min.
FONGICIDE (Conditions de sécurité)	EN 13624	Candida Albicans	5 Min.
VIRUCIDE (Conditions de sécurité)	DVV ⁽¹⁾ /RKI ⁽²⁾ 2014	BVDV, Vaccinia, HBV, HIV, HCV, Ebola, Herpes, Influenza H1N1, H5N1, Coronavirus	2 Min.
TUBERCULOCIDE (Conditions de sécurité)	EN 14348	Mycobacterium Terrae (Substitut. M. tuberculosis)	15 Min.
MYCOBACTERICIDE (Conditions de sécurité)	EN 14348	Mycobacterium Terrae Mycobacterium Avium	15 Min.

* Y compris toutes les souches résistantes aux antibiotiques telles que Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, streptococcus pneumoniae, etc.

1) DVV: Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (Association allemande pour le contrôle des maladies virales)

2) RKI: Robert Koch Institute – Autorité fédérale allemande de la santé

Conditionnement

- Spray de 1 litre (Ref. 20034)
- Recharge de 5 litres (Ref. 20008)

Propriétés physiques

- Apparence: Solution moussante
- Densité: 0.99 g/cm³ à 20°C
- pH: 9.5-10.5 à 20°C
- Odeur: Neutre
- Stockage: 5°C - 35°C
- Stabilité: 3 ans
- Biodégradabilité: Selon OCDE 301D

Compatibilité

NOSOPROTECT 100 est compatible avec la plupart des matériaux tels que l'acier inoxydable, l'aluminium, le verre, la céramique, les plastiques durs, l'ébonite, etc. NOSOPROTECT 100 n'est pas compatible avec les préparations désinfectantes contenant des aldéhydes.

Composition

N- (3-aminopropyl) -N dodecylpropano-1,3-diamine, enzymes, surfactants non ioniques <5%, inhibiteurs de corrosion, agent mouillant, excipients.

Certifications

- Marquage CE conformément à la directive 93/42/CEE pour les dispositifs médicaux
- Dispositif médical de classe IIb

Le nettoyage des instruments

Traitement manuel ou automatisé

Le traitement des instruments est une étape cruciale afin d'éviter la transmission d'infections nosocomiales. Elle est accomplie par le personnel compétent du Service Central de Stérilisation des établissements de santé et exige beaucoup de rigueur.

En effet, des processus de nettoyage et de désinfection respectés et appropriés peuvent réduire considérablement les risques de contamination croisée entre les dispositifs médicaux invasifs ou non, et les patients.

Le Service Central de Stérilisation utilise deux méthodes principales pour le nettoyage des instruments médicaux et chirurgicaux:

1. En bac d'immersion / par nettoyage manuel conventionnel
2. Dans les laveurs automatiques

Dans les deux cas, l'utilisation d'un détergent adapté est essentielle.

Dans le premier cas, une solution enzymatique est particulièrement recommandée afin de dissoudre les dépôts de protéines, graisse, amidon et les résidus de sang. Il est primordial de considérer la stabilité des enzymes dans le temps.



L'efficacité d'un détergent enzymatique dépend de cette stabilité laquelle doit être prise en compte avant achat. Pour cette raison, nous avons choisi la meilleure qualité d'enzymes actuellement présentes sur le marché pour nos détergents enzymatiques **NOSOZYM** et **NOSOZYM 6 PLUS**. Hautement stabilisées, elles conservent leur activité comme aucune autre.

Dans les laveurs automatiques, il est préférable d'utiliser une solution au pH alcalin afin de dissoudre les résidus organiques et plus spécialement les protéines et les graisses. Notre détergent alcalin **NOSOCLEAN** est composé d'agents alcalins, de surfactants spécifiques et de protéase nouvelle génération pour davantage d'efficacité.

En seconde et troisième étape, nous recommandons l'utilisation de **NEUTRALKAN**, agent neutralisant acide afin d'éliminer les résidus alcalins et minéraux, suivi de **NOSOCLEAR** pour un fini sans traces et un séchage rapide. La combinaison de nos produits garantit des résultats optimaux et aide à maintenir les laveurs en bon état.

Les instruments médicaux et chirurgicaux représentent un gros investissement pour les établissements de santé. Pour cette raison, chaque produit MEDALKAN a été développé avec une attention particulière afin de protéger les instruments et équipement de la corrosion.

Afin d'obtenir des résultats optimaux et assurer une compatibilité totale entre les produits, MEDALKAN recommande l'utilisation de sa ligne complète spécialement formulée pour le traitement des instruments:

- **NOSOCLEAN** pour un nettoyage performant
- **CITRALKAN** ou **NEUTRALKAN** pour l'élimination des résidus alcalins et minéraux
- **NOSOCLEAR** pour une finition impeccable et un séchage ultra rapide

NOSOCLEAN®

Détergent alcalin pour le traitement des instruments chirurgicaux et de l'équipement

NOSOCLEAN est un détergent alcalin très concentré et de haute efficacité spécialement formulé pour le nettoyage des instruments chirurgicaux, de l'équipement médical endoscopique et anesthésique, des instruments ophtalmologiques, de la verrerie de laboratoire et applications similaires.

Formulé avec des agents alcalins, des tensioactifs, des enzymes hautement stabilisées et de puissants inhibiteurs de corrosion, NOSOCLEAN facilite la dissolution des résidus organiques tels que les dépôts gras et protéiques tout en contribuant efficacement à l'élimination du biofilm.

NOSOCLEAN est recommandé pour les instruments thermorésistants et thermosensibles. Il peut être utilisé dans les laveurs automatiques, les bacs à ultrasons ou les bacs d'immersion.



Propriétés

- Excellente efficacité détergente grâce à la synergie entre agents alcalins, tensioactifs et enzymes de dernière génération hautement stabilisées
- Ne laisse pas de résidus
- Conforme aux directives de l'Institut Robert Koch concernant la décontamination des prions (maladie de Creutzfeldt-Jacob) sur le matériel chirurgical
- Contribue à l'élimination du biofilm
- Peut être utilisé en eau douce comme en eau dure
- Ne mousse pas, protège les instruments de la corrosion et de la décoloration
- Approprié aux instruments thermosensibles et thermorésistants

Composition

Surfactants anioniques et non-ioniques <5% , agent chélatant, inhibiteurs de corrosion, régulateur de pH.

Compatibilité

NOSOCLEAN est compatible avec la plupart des matériaux tels que l'acier inoxydable, l'aluminium, le verre, la céramique, les plastiques durs, l'ébonite, etc.

La compatibilité avec les matériaux sensibles doit toujours être vérifiée avant usage.

Certifications

- Marquage CE conformément au règlement MDR (EU 2017/745) relatif aux dispositifs médicaux
- Dispositif médical de classe I

Conditionnement

- Bidon de 5 litres (Ref. 20026)
- Bidon de 10 litres (Ref. 20027)

Propriétés physiques

- Apparence: Solution transparente
- Densité: 1.02 g/cm³ à 20°C
- pH: 10.00-10.50 à 20°C
- pH (1% dans eau désionisée): 10,50-10,80 à 20°C
- Viscosité: <50 mPas à 20°C
- Stockage: 5°C - 35°C
- Stabilité: 3 ans
- Biodégradabilité: Selon OCDE 301D

Recommandations et dosages

METHODE DE NETTOYAGE	DOSAGE RECOMMANDE (%) *	DOSAGE RECOMMANDE (ml/l)	TEMPERATURE DE L'EAU (°C)	TEMPS DE CONTACT
EN BAC D'IMMERSION	0,4% - 2%	4 ml/l - 20 ml/l	20 - 60°C	5 - 15 min
EN BAC A ULTRASON	0,4% - 2%	4 ml/l - 20 ml/l	20 - 60°C	5 - 10 min
EN LAVEUR AUTOMATIQUE	0,1% - 1%	1 ml/l - 10 ml/l	55 - 95 °C	5 - 20 min **
	0,5% (standard dosage)	5 ml/l	60 °C	5 min

* Toujours ajuster le dosage et le temps de contact en fonction du degré de souillures et de la méthode de nettoyage. Les dosages recommandés peuvent être ajustés ou dépassés en fonction de la qualité et de la température de l'eau et du type de laveur utilisé.

** Dépend des recommandations du fabricant de laveurs.

NEUTRALKAN®

Agent neutralisant acide
et rénovateur d'instruments

CITRALKAN®

Agent neutralisant acide
pour le traitement des instruments

NEUTRALKAN et CITRALKAN sont des détergents acides. Ils éliminent le calcaire, les taches de rouille et les dépôts minéraux des instruments ainsi que des parois intérieures des laveurs-désinfecteurs.

Leur utilisation est recommandée dans les laveurs automatiques, les laveurs désinfecteurs ou autres équipements de retraitement des instruments comme agent neutralisant des résidus alcalins pour les instruments chirurgicaux et la verrerie.

En bain d'immersion comme puissant rénovateur d'instruments, NEUTRALKAN éliminera les taches de rouille et redonnera l'éclat initial des instruments dégradés ou décolorés.



	NEUTRALKAN	CITRALKAN
PROPRIETES	<ul style="list-style-type: none"> Redonne leur éclat initial aux instruments dégradés ou décolorés Élimine résidus alcalins, dépôts minéraux et taches de rouille Restaure le fini et la brillance des instruments et de la verrerie Maintient les parois internes du laveur propres et brillantes Très économique: dilution entre 0,05% et 0,4% Protège les instruments de la corrosion et de la décoloration Agent neutralisant ne contenant pas de surfactants 	<ul style="list-style-type: none"> Élimine résidus alcalins, dépôts minéraux et taches de rouille Maintient les parois internes du laveur propres et brillantes À base d'acides organiques Très économique : dilution de 0,1% à 0,2% Ne contient aucun tensioactif, protège les instruments de la corrosion et de la décoloration
PROPRIETES PHYSIQUES	<ul style="list-style-type: none"> Apparence: Solution transparente Densité: 1.50 g/cm³ à 20°C pH (0,05 - 4 ml/l.): <2 à 20°C Viscosité: <20 mPas à 20°C Stockage: 5°C - 35°C Stabilité: 3 ans Biodégradabilité: Selon OCDE 301D 	<ul style="list-style-type: none"> Apparence: Solution transparente Densité: 1,15 g/cm³ à 20°C pH (1 - 2 ml/l.): <3 à 20°C Viscosité: <10 mPas à 20°C Stockage: 5°C - 35°C Stabilité: 3 ans Biodégradabilité: Selon OCDE 301D
CONDITIONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Bidon de 5 litres (Ref. 20077) Bidon de 10 litres (Ref. 20078) 	<ul style="list-style-type: none"> Bidon de 5 litres (Ref. 20077) Bidon de 10 litres (Ref. 20078)
COMPOSITION	Acide citrique, acide phosphorique > 50%	Acide citrique ≥ 40%, inhibiteurs de corrosion
DOSAGE	<ul style="list-style-type: none"> En laveur-désinfecteur: Dilution de 0,05% (0,5 ml/l) à 0,4% (4 ml/l) En bac d'immersion: Dilution de 2% (20 ml/l) à 4% (40 ml/l) <p>Toujours ajuster le dosage et le temps de contact en fonction du degré de salissures, de la qualité de l'eau et de la température de nettoyage. Pour de meilleurs résultats, l'utilisation d'eau déminéralisée est préférable.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dans les laveurs désinfecteurs à une dilution de 1 ml/l. (0,1%) à 2 ml/l. (0,2%). <p>Toujours ajuster le dosage et le temps de contact en fonction du degré de salissures, de la qualité de l'eau et de la température de nettoyage. Pour de meilleurs résultats, l'utilisation d'eau déminéralisée est préférable.</p>
COMPATIBILITE	<p>Compatibles avec la plupart des matériaux tels que l'acier inoxydable, le verre, la céramique, les plastiques durs et les produits résistants aux acides.</p> <p>La compatibilité avec les matériaux sensibles doit toujours être vérifiée avant usage</p>	
CERTIFICATIONS	<p>Marquage CE conformément au règlement MDR (EU 2017/745) relatif aux dispositifs médicaux</p> <p>Dispositif médical de classe I</p>	

TRAITEMENT DES INSTRUMENTS

NOSOCLEAR®

Liquide de rinçage pour le traitement automatisé des instruments chirurgicaux et équipements

NOSOCLEAR est un produit de rinçage très concentré spécialement formulé pour le séchage rapide et sans traces des instruments chirurgicaux, de la verrerie et autres dispositifs médicaux sensibles.

Il peut être utilisé sur les instruments en acier inoxydable, les instruments ophtalmologiques, le matériel d'anesthésie, la verrerie de laboratoire, les plastiques et les caoutchoucs durs.

NOSOCLEAR réduit la tension superficielle de l'eau sur les instruments leur permettant de sécher rapidement sans laisser de traces.

NOSOCLEAR peut être utilisé dans les laveurs automatiques, les laveurs désinfecteurs, les laveurs de chariots et tunnels ou tout autre équipement de traitement d'instruments.



Propriétés

- Diminue considérablement le temps de séchage
- Laisse les instruments brillants et sans traces
- Très économique: dilution de 0,01% à 0,03%
- Peut être utilisé en eau douce comme en eau dure
- Ne mousse pas, protège les instruments de la corrosion et de la décoloration
- Approprié aux instruments thermosensibles

Compatibilité

NOSOCLEAR est compatible avec la plupart des matériaux tels que l'acier inoxydable, l'aluminium, le verre, la céramique, les plastiques durs, l'ébonite, etc.

La compatibilité avec les matériaux sensibles doit toujours être vérifiée avant usage.

Certifications

- Marquage CE conformément au règlement MDR (EU 2017/745) relatif aux dispositifs médicaux
- Dispositif médical de classe I
- NOSOCLEAR a été testé selon ISO 10993-1 et n'est pas toxique

Conditionnement

- Bidon de 5 litres (Ref. 20030)
- Bidon de 10 litres (Ref. 20031)

Propriétés physiques

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| ■ Apparence: | Solution jaune transparente |
| ■ Densité: | 1.02 g/cm ³ à 20°C |
| ■ pH: | 6.0-7.0 à 20°C |
| ■ pH (0,2-0,8ml/l): | 7.0-8.0 (neutre) à 20°C |
| ■ Viscosité: | <50 mPas at 20°C |
| ■ Stockage: | 5°C - 35°C |
| ■ Stabilité: | 3 ans |
| ■ Biodégradabilité: | selon OCDE 301D |

Composition

Surfactants non-ioniques 15% – 20%, phosphonates, inhibiteurs de corrosion, régulateur de pH, excipients.

Dosage

NOSOCLEAR s'utilise dans les laveurs-désinfecteurs pendant le cycle de rinçage à une dilution de 0,1 ml/l. (0,01%) à 0,3 ml/l. (0,03%).

Le taux de dilution dépend de la qualité et de la température de l'eau de rinçage. Pour de meilleurs résultats, l'utilisation d'eau déminéralisée est préférable.

Une ligne complète de détergents pour le traitement automatisé des bassins de lit

Le nettoyage et la désinfection des bassins de lits et autres ustensiles similaires doivent être effectués avec le plus grand soin possible.

Une procédure stricte est obligatoire pour éviter toute contamination croisée entre la chambre du patient et l'Unité centrale de Stérilisation.

Des détergents adaptés et spécialement développés pour une utilisation dans les lave-bassins automatisés réduisent considérablement le risque infectieux directement lié aux déchets humains contaminés par de potentiels agents pathogènes.



Pour cette raison, MEDALKAN a développé deux produits complémentaires pour le traitement spécifique des bassins de lit dans les laveurs-désinfecteurs:

1. Phase de nettoyage: utilisation de NOSOMATIC SK1 , puissant détergent alcalin capable d'éliminer les résidus organiques les plus tenaces tout en maintenant propres les surfaces internes des laveurs.
2. Phase de rinçage: utilisation de NOSOMATIC SK2 , détartrant et agent de rinçage acide qui protège la chaudière et empêche la formation de calcaire et de taches d'eau tout en accélérant le processus de séchage.

Afin d'obtenir des résultats optimaux et assurer une compatibilité totale entre les produits, MEDALKAN recommande l'utilisation de sa ligne complète spécialement formulée pour chaque étape:

- NOSOMATIC SK1 pour un nettoyage performant en toute sécurité
- NOSOMATIC SK2 pour l'élimination du calcaire, une finition impeccable et un séchage rapide

NOSOMATIC SK1®

Détergent alcalin pour lave-bassins

NOSOMATIC SK1 est un détergent alcalin hautement concentré spécialement formulé pour le nettoyage automatisé des bassins de lit, des bouteilles d'urine, de la verrerie, des pots d'aisance et autres ustensiles.

NOSOMATIC SK1 dissout et élimine les résidus organiques tenaces tels que l'urine et les excréments humains tout en maintenant propres les surfaces internes des laveurs.

Non moussant, il est parfaitement adapté aux laveurs automatiques. Formulé avec de puissants inhibiteurs de corrosion, NOSOMATIC SK1 protège les bouteilles en verre, l'acier inoxydable, les bassins et autres contenants spécifiques, de la corrosion et de la décoloration.

Propriétés

- Excellente efficacité détergente grâce à la combinaison spécifique d'agents alcalins et séquestrants
- Peut être utilisé en eau douce ou dure
- Ne mousse pas
- Protège les instruments de la corrosion et de la décoloration
- Approprié aux ustensils thermosensibles et thermorésistants
- Maintient les parois internes des laveurs parfaitement propres

Composition

Agents séquestrants, inhibiteurs de corrosion, régulateur de pH

Compatibilité

NOSOMATIC SK1 est compatible avec la plupart des matériaux tels que l'acier inoxydable, l'aluminium, le verre, la céramique, les plastiques durs, l'ébonite, etc.

La compatibilité avec les matériaux sensibles doit toujours être vérifiée avant usage.

Certifications

- Marquage CE conformément au règlement MDR (EU 2017/745) relatif aux dispositifs médicaux
- Dispositif médical de classe I



Conditionnement

- Bidon de 5 litres (Ref. 20080)
- Bidon de 10 litres (Ref. 20081)

Propriétés physiques

- Apparence: Solution transparente
- Densité: 1.2 g/cm³ à 20°C
- pH: 11.00 à 20°C
- pH (1% dans eau désionisée): 10.70-11.00 à 20°C
- Viscosité: <50 mPas à 20°C
- Stockage: 5°C - 35°C
- Stabilité: 3 Ans
- Biodégradabilité: Selon OCDE 301D

Dosage

Régler le laveur pour une dilution comprise entre 0,1 % (1 ml/l) et 0,3 % (3 ml/l). Le dosage s'effectue via l'interface du laveur. Suivre les instructions du fabricant du laveur. Toujours adapter le dosage et le temps de contact en fonction du degré de salissure et de la dureté de l'eau. Pour de meilleurs résultats, l'utilisation d'eau déminéralisée est conseillée.

L'utilisation de **NOSOMATIC SK2, détartrant acide et produit de rinçage**, est fortement recommandée pendant le cycle de rinçage pour compléter le traitement.

NOSOMATIC SK2[®]

Détartrant acide et liquide de rinçage pour lave-bassins

NOSOMATIC SK2 est un détartrant et produit de rinçage acide spécialement formulé pour une utilisation dans les laveurs-désinfecteurs de bassins de lit.

Il est utilisé pour le détartrage et le séchage des bassins de lit, des bouteilles d'urine, des pots d'aisance et autres récipients et ustensiles.

NOSOMATIC SK2 accélère le processus de séchage tout en empêchant la formation de taches d'eau.

Dans les machines équipées de générateurs de vapeur intégrés, NOSOMATIC SK2 offre une protection fiable contre la formation de calcaire dans la chaudière, les tuyaux et les buses à jet, même en cas de dureté d'eau élevée.

Propriétés

- Séchage rapide et sans traces
- Convient aux ustensiles thermosensibles
- Protège la chaudière et les parois des dépôts calcaires
- Peut être utilisé en eau douce ou en eau dure
- Empêche la formation de tartre et de taches d'eau
- Odeur fraîche et agréable

Composition

Tensioactifs anioniques et non ioniques, acide organique, inhibiteurs de corrosion, régulateur de pH, parfum

Compatibilité

NOSOMATIC SK2 est compatible avec la plupart des matériaux tels que l'acier inoxydable, l'aluminium, le verre, la céramique, les plastiques durs, l'ébonite, etc.

La compatibilité avec les matériaux sensibles doit toujours être vérifiée avant usage.

Certifications

- Marquage CE conformément au règlement MDR (EU 2017/745) relatif aux dispositifs médicaux
- Dispositif médical de classe I



Conditionnement

- Bidon de 5 litres (Ref. 20083)
- Bidon de 10 litres (Ref. 20084)

Propriétés physiques

- Apparence: Solution transparente
- Densité: 1.1 g/cm³ à 20°C
- pH: 2.50-3.00 à 20°C
- pH (1% dans eau désionisée): 2.50-3.00 à 20°C
- Odeur: Senteur fraîche
- Viscosité: <50 mPas à 20°C
- Stockage: 5°C - 35°C
- Stabilité: 3 Ans
- Biodégradabilité: Selon OCDE 301D

Dosage


Régler le laveur pour une dilution comprise entre 0,05% (0,5 ml/l) et 0,15% (1,5 ml/l). Le dosage s'effectue via l'interface du laveur. Suivre les instructions du fabricant du laveur. Toujours adapter le dosage et le temps de contact en fonction du degré de salissure et de la dureté de l'eau. Pour de meilleurs résultats, l'utilisation d'eau déminéralisée est conseillée.

TABLEAU RECAPITULATIF DES PRODUITS

APERÇU DES PRODUITS	CHAMPS D'ACTIVITÉ				COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE										AUTRE COMPATIBILITÉ				SPECTRE D'ACTIVITÉ							PH			RECOMMANDATION DE DOSAGE (%)	EMBALLAGE	CLASSE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
	NETTOYAGE	DESINFECTION	NEUTRALISANT	RINÇAGE	ALUMINIUM	ACIER INOXYDABLE	CHROME	PEXIGLAS	CÉRAMIQUE	PLASTIQUES DURS	ÉBONITE	CAOUTCHOUC	BAINS A ULTRASON	LAVEUR DISINFECTEURS	LAVE BASSINS	ENDOSCOPES	BACTÉRICIDE	FONGICIDE *	VIRUCIDE**	VIRUS NON ENVELOPPÉ	MYCOBACTÉRIENNE	TUBERCULOSE	SPORICIDE	ALKALIN	NEUTRE	ACIDE					
																											NETTOYAGE	DESINFECTION			
NETTOYAGE ET DESINFECTION DES SURFACES																															
NOSOCEPT 100	X	X			X	X	X	X	X	X	X						X	X	X					X				SPRAY 1L BIDON 5 L	Prêt à l'emploi	IIa	
NOSOFAST TB	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X					X				SPRAY 1L BIDON 5 L	Prêt à l'emploi	IIa	
NOSOFLOOR	X	X			X	X	X	X	X	X	X						X	X	X					X				5 LITRE	0,25% A 1%	IIa	
NETTOYAGE ET DESINFECTION DES INSTRUMENTS																															
NOSOPROTECT	X	X			X	X	X	X	X	X	X						X	X	X					X				5 LITRE	0,25% A 1%	IIb	
NOSOPROTECT 100	X	X			X	X	X	X	X	X	X						X	X	X					X				SPRAY 1L BIDON 5 L	Prêt à l'emploi	IIb	
NETTOYAGE ET DESINFECTION DE HAUT NIVEAU DES ENDOSCOPES ET INSTRUMENTS																															
NOSOZYM	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X			5 LITRE	Jusqu'à 0,5%	I	
NOSOZYM 6 PLUS	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X			5 LITRE	Jusqu'à 0,5%	I	
NOSOCID PAA		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X	X		5 LITRE	Prêt à l'emploi	IIb	
TRAITEMENT DES INSTRUMENTS																															
NOSOCLEAN	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X			5 LITRE	0,4% A 2%	I	
NEUTRALKAN	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X			5 LITRE	0,05% A 0,4%	I	
CITRALKAN		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X			5 LITRE	0,1% A 0,2%	I	
NOSOCLEAR				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X			5 LITRE	0,01% A 0,03%	I	
DÉTERGENTS POUR LAVE-BASSINS																															
NOSOMATIC SK1	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												5 LITRE	0,1% A 0,3%	I	
NOSOMATIC SK2			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X		5 LITRE	0,05% A 0,15%	I	

** Inclut les levures et le cas échéant les moisissures / Se référer à la Fiche Technique du Produit (PDS) pour plus de détails

* Testé selon la recommandation DVV/RKI et/ou EN 14476 / Reportez-vous à la fiche technique du produit (PDS) pour plus de détails

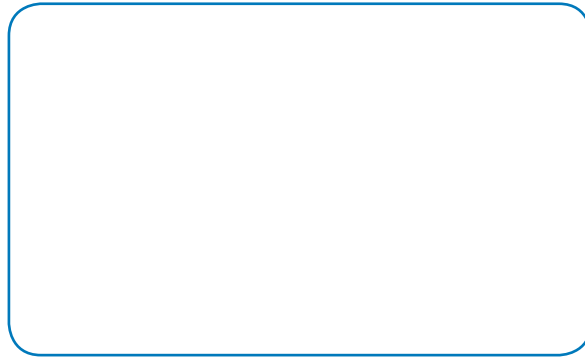

Votre distributeur



MEDALKAN

TECHNIKI EMPORIKI STAVRIDIS LTD

102, rue Michalakopoulou, 115-28 Athènes

Tel.: (+30) 210 74 84 847, Fax: (+30) 210 77 72 009

Site: www.medalkan.fr

E-mail: contact@medalkan.gr



Pour plus d'informations,
rendez-vous sur notre site internet www.medalkan.fr